


How to collect a nasal sample from home

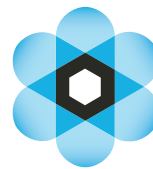

CIRRUSDX

Your home collection kit contains: (1) specimen bag,
(1) test requisition form, (1) sterile swab and NEST® tube labeled
with patient name and DOB, (1) pre-paid FedEx clinical return pak

Follow these steps:

Check	Make sure your information is correct on the test requisition form and Nest® tube.
Write	Write the date you collect your sample in the highlighted area on the test requisition form.
Clean	Thoroughly wash your hands.
Remove	Carefully remove the swab from the packaging without touching the soft tip.
Collect	(1) Insert the tip of the swab into one nostril until the tip of the swab is no longer visible. (2) Rotate in a circular motion around the entire inside of the nostril for at least 10 seconds. (3) Take the swab out of the nostril and repeat for the other side. (4) Break swab at the scoreline, place it into the supplied NEST® tube, and screw cap on firmly.
Pack	Place your sample in the specimen bag and seal it. Put your folded requisition form and sealed specimen bag inside of the pre-paid FedEx clinical return pak.
Send	Call 1-800-GO-FEDEX to arrange pick up of your sample. Or drop it off in a FedEx box or at a FedEx shipping center.*

*Please note, samples shipped out on
Fridays will be accepted for Saturday
delivery and testing.

Questions? We're here to help.

Call **1-240-813-8801** Monday – Friday, 8 AM to 9 PM ET.
Or email us: **reports@cirrusdx.com**

Cómo obtener una muestra nasal en casa



El kit de recolección de muestras en el hogar contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de la prueba, (1) hisopo estéril y tubo NEST® etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) paquete de devolución clínica FedEx prepagado.

Siga estos pasos:

Asegúrese	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario de solicitud de la prueba y en el tubo NEST®.
Escriba	Escriba la fecha en que recolecta su muestra en el área resaltada del formulario de solicitud de la prueba.
Limpie	Lávese bien las manos.
Retire	Saque con cuidado el hisopo del envoltorio sin tocar la punta blanda.
Recolecte	(1) Introduzca la punta del hisopo en una fosa nasal hasta que la punta del hisopo deje de ser visible. (2) Gire suavemente el hisopo de forma circular por al menos 10 segundos. (3) Saque el hisopo de la fosa nasal y repita la operación en el otro lado. (4) Coloque la punta blanda del hisopo en el tubo de recolección NEST®. (5) Quieb্রে el hisopo en la línea demarcada y enrosque firmemente el tapón del tubo NEST® con la punta blanda adentro.
Empaque	Meta su espécimen en la bolsa pequeña y séllela. Doble su formulario y métalo con su espécimen el paquete clínico prepagado de Fedex.
Envíe	Llame a 1-800-GO-FEDEX para programar la recogida de su muestra. O deposítela en un buzón de FedEx o en un centro de envíos de FedEx.*

*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: **homecollection@cirrusdx.com**