


# How to collect a vaginal sample from home

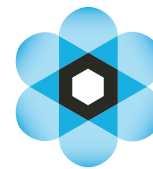

**CIRRUSDX**

Your home collection kit contains: (1) specimen bag, (1) test requisition form, (1) sterile swab and NEST<sup>®</sup> tube labeled with patient name and DOB, (1) prepaid clinical return pak

## Follow these steps:

<b>Check</b>	Make sure your information is correct on the test requisition form and Nest <sup>®</sup> tube.
<b>Write</b>	Write the date you collect your sample in the highlighted area on the test requisition form.
<b>Clean</b>	Thoroughly wash your hands.
<b>Remove</b>	Carefully remove the swab from the packaging without touching the soft tip.
<b>Collect</b>	(1) Carefully insert swab into vagina approximately 5 cm (2 in) past vaginal opening. (2) Gently rotate swab against the vaginal wall for about 10–30 seconds. (3) Break swab at the scoreline, place it into the supplied NEST <sup>®</sup> tube, and screw cap on firmly.
<b>Pack</b>	Place your sample in the specimen bag and seal it. Put your folded requisition form and sealed specimen bag inside of the prepaid clinical return pak.
<b>Send</b>	Call <b>1-800-GO-FEDEX</b> to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a FedEx Office shipping center.* Call <b>1-800-PICK-UPS</b> to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a UPS Store location.*


\*Please note, samples shipped out on Fridays will be accepted for Saturday delivery and testing.

### Questions? We're here to help.

Call **1-240-813-8801** Monday through Friday, 8 AM to 9 PM ET.

Or email us: [homecollection@cirrusdx.com](mailto:homecollection@cirrusdx.com)

# Cómo obtener una muestra vaginal en casa

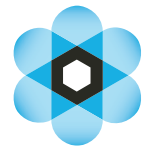

CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de la prueba, (1) hisopo estéril y tubo NEST® etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) paquete de devolución clínica prepago.

## Siga estos pasos:

<b>Asegúrese</b>	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario de solicitud de la prueba y en el tubo NEST®.
<b>Escriba</b>	Escriba la fecha en que recolecta su muestra en el área resaltada del formulario de solicitud de la prueba.
<b>Limpie</b>	Lávese bien las manos.
<b>Retire</b>	Saque con cuidado el hisopo del envoltorio sin tocar la punta blanda.
<b>Recolecte</b>	(1) Introduzca con cuidado el hisopo en la vagina aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) más allá de la abertura vaginal. (2) Gire suavemente el hisopo contra la pared vaginal durante 10-30 segundos. (3) Con cuidado, saque el hisopo. (4) Coloque la punta blanda del hisopo en el tubo de recolección NEST®. (5) Quieb্রে el hisopo en la línea demarcada y enrosque firmemente el tapón del tubo NEST® con la punta blanda adentro.
<b>Empaque</b>	Meta su espécimen en la bolsa pequeña y séllela. Doble su formulario y métalo con su espécimen el paquete clínico prepago.
<b>Envíe</b>	Llame al <b>1-800-GO-FEDEX</b> para programar la recolección de su muestra. O entréguela en un centro de envíos de FedEx Office.* Llame al <b>1-800-PICK-UPS</b> para programar la recolección de su muestra. O entréguela en una sucursal de UPS Store.

\*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

©2026 CirrusDX, Inc. Todos los derechos reservados  
F-287.02-ES

## ¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: [homecollection@cirrusdx.com](mailto:homecollection@cirrusdx.com)