


How to collect a semen sample from home

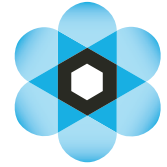

CIRRUSDX

Your home collection kit contains: (1) specimen bag, (1) test requisition form, (1) sample cup labeled with patient name and DOB, (1) sterile cleansing wipe (1) prepaid clinical return pak

Follow these steps:

Check	Make sure your information is correct on the test requisition form and collection cup.
Write	Write the date you collect your sample in the highlighted area on the test requisition form.
Clean	Thoroughly wash your hands. Gently cleanse and wipe genital area using sterile wipe provided (focusing on tip of penis).
Collect	(1) Remove lid from cup. (2) The sample must be collected from masturbation with no use of lubricants or saliva. (3) Ejaculate into collection cup. (4) Tightly seal cup.
Pack	Place your sample in the specimen bag and seal it. Put your folded requisition form and sealed specimen bag inside of the prepaid clinical return pak.
Send	Call 1-800-GO-FEDEX to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a FedEx Office shipping center.* Call 1-800-PICK-UPS to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a UPS Store location.*


*Please note, samples shipped out on Fridays will be accepted for Saturday delivery and testing.

Questions? We're here to help.

Call **1-240-813-8801** Monday through Friday, 8 AM to 9 PM ET.

Or email us: homecollection@cirrusdx.com

Cómo obtener una muestra de semen en casa

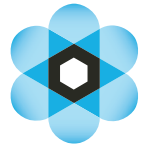

CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de la prueba, (1) vaso de recolección de muestras etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) toallita limpiadora estéril, (1) paquete de devolución clínica prepagado.

Siga estos pasos:

Asegúrese	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario de solicitud de la prueba y en el vaso de recolección.
Escriba	Escriba la fecha en que recolecta su muestra en el área resaltada del formulario de solicitud de la prueba.
Limpie	Limpie su área genital con cuidado utilizando la toallita esterilizada enviada en su kit (enfocándose en la punta del pene).
Recolecte	(1) Retire la tapa del vaso de recolección. (2) Recoja la muestra durante masturbación, sin usar lubricantes ni saliva. (3) Eyacule en el vaso de recolección. (4) Cierre bien el vaso.
Empaque	Meta su espécimen en la bolsa pequeña y séllela. Doble su formulario y métalo con su espécimen el paquete clínico prepagado.
Envíe	Llame al 1-800-GO-FEDEX para programar la recolección de su muestra. O entréguela en un centro de envíos de FedEx Office.* Llame al 1-800-PICK-UPS para programar la recolección de su muestra. O entréguela en una sucursal de UPS Store.

*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

©2026 CirrusDx, Inc. Todos los derechos reservados
F-294.02-ES

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: homecollection@cirrusdx.com