


How to collect a rectal sample from home

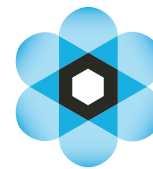

CIRRUSDX

Your home collection kit contains: (1) specimen bag, (1) test requisition form, (1) sterile swab and NEST[®] tube labeled with patient name and DOB, (1) prepaid clinical return pak

Follow these steps:

Check	Make sure your information is correct on the test requisition form and transport tube.
Write	Write the date you collect your sample in the highlighted area on the test requisition form.
Clean	Thoroughly wash your hands.
Remove	Carefully remove the swab from the packaging without touching the soft tip.
Collect	(1) Hold the swab between your thumb and forefinger. (2) With one leg raised and steadied, pull back one buttock with the non-occupied hand. (3) Carefully insert the swab into the rectum about 1-2 inches (3-5 cm) past the anus. (4) Gently rotate the swab in a circular motion for at least 10 seconds. (5) Gently remove the swab from your anus. (6) Place the soft tip of the swab into the collection tube. (7) Break swab at the scoreline, place it into the supplied NEST [®] tube, and screw cap on firmly.
Pack	Place your sample in the specimen bag and seal it. Put your folded requisition form and sealed specimen bag inside of the prepaid clinical return pak.
Send	Call 1-800-GO-FEDEX to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a FedEx Office shipping center.* Call 1-800-PICK-UPS to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a UPS Store location.*


*Please note, samples shipped out on Fridays will be accepted for Saturday delivery and testing.

Questions? We're here to help.

Call **1-240-813-8801** Monday through Friday, 8 AM to 9 PM ET.

Or email us: homecollection@cirrusdx.com

Cómo obtener una muestra rectal en casa

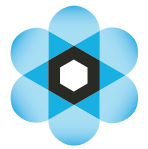

CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de prueba, (1) hisopo estéril y tubo NEST® etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) paquete de devolución clínica prepago.

Siga estos pasos:

Asegúrese	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario de solicitud de la prueba y en el tubo NEST®.
Escriba	Escriba la fecha en que recolecta su muestra en el área resaltada del formulario de solicitud de la prueba.
Limpie	Lávese bien las manos.
Retire	Saque con cuidado el hisopo del envoltorio sin tocar la punta blanda.
Recolecte	(1) Sujete el hisopo entre su dedo gordo (o pulgar) y su dedo índice de su mano dominante. (2) Con una pierna levantada, separe sus glúteos, agarrando uno firmemente con su otra mano. (3) Introduzca cuidadosamente el hisopo en su recto de 3-5mm más allá del ano. (4) Gire suavemente el hisopo de forma circular por al menos 10 segundos. (5) Con cuidado, retire el hisopo del ano. (6) Coloque la punta blanda del hisopo en el tubo de recolección NEST®. (7) Quieb্রে el hisopo en la línea demarcada y enrosque firmemente el tapón del tubo NEST® con la punta blanda adentro.
Empaque	Meta su espécimen en la bolsa pequeña y séllela. Doble su formulario y métalo con su espécimen el paquete clínico prepago.
Envíe	Llame al 1-800-GO-FEDEX para programar la recolección de su muestra. O entréguela en un centro de envíos de FedEx Office.* Llame al 1-800-PICK-UPS para programar la recolección de su muestra. O entréguela en una sucursal de UPS Store.

*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: homecollection@cirrusdx.com